

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met standaard duwbuizen en éénzijdige rem rechts OF links

Revisies

Revisie	Datum (dd-mm-jjjj)	Auteur	Beschrijving van de wijziging
V.1.0	12-12-2019	R. Keuning	Eerste uitgave t.b.v. ISO13485:2016
V.1.1	15-10-2024	R. Keuning	Tweede uitgave tekst en foto toegevoegd
V.2.0	05-02-2025	R. Keuning	Derde uitgave QR code, verklaring, garantieregeling, MDR
V.2.1	06-08-2026	R. Keuning	Vierde uitgave afvalverwerking

Producttype + artikelnummer:

Manufacturer's name: Premis Medical BV
Business: de Nort 20
 3931 NG Woudenberg
 The Netherlands



Verklaart hierbij dat het hieronder gespecificeerde product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en in overeenstemming is met de bepalingen van de Verordening (MDR) van het Europees Parlement en de Raad inzake medische hulpmiddelen, inclusief de laatste wijzigingen, en de nationale wet.

Het hieronder gespecificeerde product is "technische hulp voor mensen met beperkingen", geclassificeerd als medisch hulpmiddel van Class I. De classificatie is gebaseerd op de vereisten van regel 1 van bijlage VII van Verordening (EU) 2017/245.

Product: RO4143AELXXRX en RO4143AELXXLX
Classification: Class 1 = light risk class
SRN number: NL-MF-000005783
Udinummer: 08718874134678, 08718874134715, 08718874138072, 08718874138119, 08718874777257, 08718874777295, 08718874131271, 08718874131318, 08718874127878, 08718874127915, 08718874124471, 08718874124518, 08718874121074, 08718874121111, 08718874117671, 08718874117718

Producttype + artikelnummer:

Premis Provo 2^e generatie Rollator met standaard duwbuizen en éénzijdige rem rechts Of links, in diverse kleuren.

Artikelnummers met éénzijdige rem links:

Metallic Aubergine	RO4143AELXXLX	Metallic Paars	RO4143PELXXLX
Metallic Blauw	RO4143BELXXLX	Metallic Titanium	RO4143TELXXLX
Metallic Oranje	RO4143OELXXLX	Metallic Wit (met rode biesen)	RO4143WELXXLX
Metallic Appelgroen	RO4143GELXXLX	Metallic Zwart	RO4143ZELXXLX

Artikelnummers met éénzijdige rem rechts:

Metallic Aubergine	RO4143AELXXRX	Metallic Paars	RO4143PELXXRX
Metallic Blauw	RO4143BELXXRX	Metallic Titanium	RO4143TELXXRX
Metallic Oranje	RO4143OELXXRX	Metallic Wit (met rode biesen)	RO4143WELXXRX
Metallic Appelgroen	RO4143GELXXRX	Metallic Zwart	RO4143ZELXXRX

Past dit product bij u?

De rollator die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of deze specifieke rollator geschikt is voor u.

Productafmetingen (lxbxh):	Handvat hoogte: 78 tot 100 cm Zithoogte: 61,5 cm Zitbreedte: 43 cm
Productgewicht:	10,15 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg

Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de winkel waar u de rollator gekocht heeft!

Versie:	2.1	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-08-2026	Auteur:	R. Keuning

Pagina	2 van 6
Doc.nr.	G.1.1.2.1.627 RO4143AELXXRX
Procedure-verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	06-08-2026

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met standaard duwbuizen en éézijdige rem rechts OF links

Omschrijving van het product:

Rollator met stalen frame, voorzien van:

Duwbeugel), éézijdige loopparkeerrem links of rechts, dienblad, harde kunststof zitting, een zitbreedte van 43 cm, draadmand, stokkenbakhouder, opvouwbeveiliging en PU banden.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 120 kg dient niet te worden overschreden.
2. Bij gebruik van het zitje dient u vooraf de rollatorremmen op de parkeerstand te zetten, om weggrollen te voorkomen.
3. Het dienblad is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
4. Denk bij het gebruik van de opvouwbeveiliging om uw vingers, neem de gebruiksinstructies in acht.
5. Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht uit. De rollator weegt 10,15 kg. Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug.
6. Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen of onderdelen van de draadmandophanging.
7. Om kantelgevaar of framebreuk van de rollator te voorkomen: Hang geen voorwerpen aan de rollator die hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik uitsluitend door Premis goedgekeurde of door Premis speciaal ontwikkelde hulpstukken.
8. Breng geen wijzigingen aan op de rollator zonder autorisatie van Premis.
9. Repareer of vervang onderdelen van de rollator uitsluitend met originele onderdelen.
10. Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen.
11. Let bij het lopen op dat u goed tussen de achterwielen van de rollator loopt en zo rechtop mogelijk blijft lopen, om vallen te voorkomen.
12. Gebruik de rollator niet wanneer deze beschadigd of defect is.

Inbegrepen in de verpakking van dit product:

1x Premis Provo 2^e Generatie rollator
1x eenzijdige remkabel (RO4EZR)
1x Premis Provo Dienblad (RO4DBP)
1x Premis Provo Draadmand (RO41MA)
2x Vleugelmoeren (RO4FHBUT)

Beoogd gebruik van het product:

De Premis Provo 2^e Generatie Rollator met standaard duwbuizen is bestemd voor gebruik bij mensen die slecht ter been zijn en extra ondersteuning behoeven tijdens het staan en lopen. De eenzijdige rem biedt mensen met verminderde spierkracht of bruikbaarheid van één hand (links of rechts) de mogelijkheid om toch veilig en zelfstandig te kunnen lopen met een rollator. De rollator biedt uitzonderlijk veel ondersteuning, stabiliteit en de mogelijkheid om tussentijds te rusten op het zitje. Hierdoor kan men langer zelfstandig verplaatsen, zowel binnenshuis als buiten.

Installeren voor gebruik:


-Zie voor de nummerv verwijzingen de afbeelding op pagina 3

1. Haal de rollator uit de doos.
2. Klap de rollator uit door de bovenzijde van het achterframe (1) omlaag en naar voren te drukken. Het frame vouwt zich uit. Controleer of de rollator volledig uitgekapt is door de bovenzijde van het achterframe (1) goed aan te drukken en ook het zitje goed aan te drukken, tot u een klik voelt. De opvouwbeveiliging (2) is nu volledig uitgevouwen.
3. Plaats de duwbuizen in het frame (3) van de rollator. Let er op dat de handgreep naar achteren wijst en de remkabel (4) naar voren plaatst en deze niet gedraaid is.
4. Plaats de vleugelmoeren (5) in het frame om de steunen vast te zetten. Let op dat u de moer (5a) van voor naar achteren in de openingen plaatst. De bijgeleverde ring (5b) plaatst u aan de achterzijde om de moer, tussen het frame en de vleugel (5c). Draai de vleugelmoer stevig, maar niet te strak aan, tot de steunen niet meer kunnen verdraaien.
5. Hang de draadmand aan de ophanghaken.
6. Leg het dienblad op het zitje. Let er op dat de pootjes van het dienblad in de gaatjes in de zitting vallen, zodat het dienblad niet verschuift.
7. Controleer de afstelling van de remhendels. Kunt u de remmen gemakkelijk inknijpen en op de parkeerstand zetten, waarbij de rollator stevig remt. Dan staan ze goed. Gaat de rem stroef of te soepel, dan kunt u met een schroevendraaier (niet meegeleverd) de schroeven in het remhuis (6) voorzichtig bijdraaien om de rem af te stellen.
8. Controleer of de remschoentjes (9) tijdens het lopen niet over het wiel slepen. De remschoentjes mogen alleen over het wiel slepen wanneer de remhendels ingedrukt worden. Wanneer dit niet het geval is, kunt u halverwege de remkabel twee hulsjes (8) wegschuiven om de kabelsteller (9) zichtbaar te maken. Gebruik de kabelsteller om de afstand van het remschoentje tot het wiel te vergroten of te verkleinen.

Versie:	2.1	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-08-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met standaard duwbuizen en éézijdige rem rechts OF links

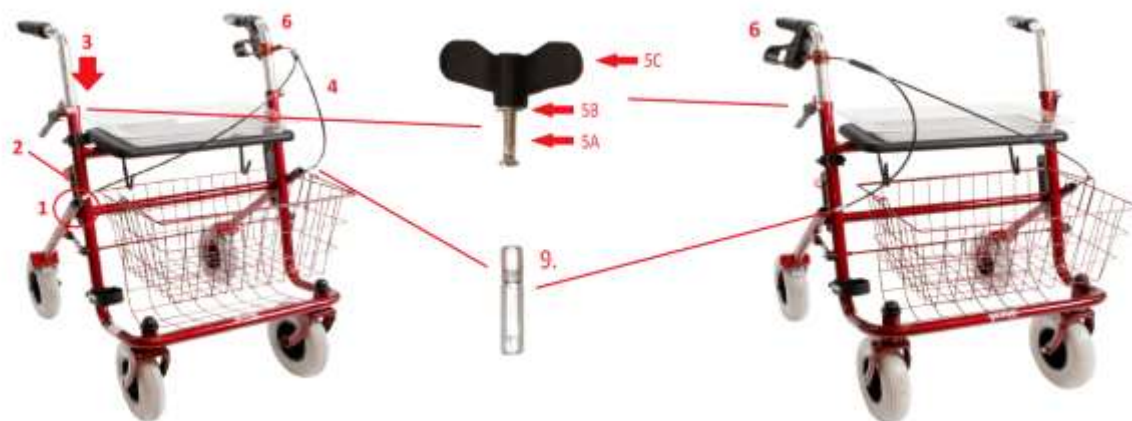

Voorafgaand aan het eerste gebruik:

1. Meet de afstand vanaf de grond tot aan uw pols .
2. Stel de duwbuizen zo in, dat deze gelijk staat aan uw zojuist opgemeten hoogte.
3. Oefen het gebruik van de remhendel en parkeerstand voordat u met de rollator gaat lopen.

Bijzonderheden bij dit product:

1. De rollator is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. De rollator kan voorzien worden van diverse sturen en remsystemen. Deze gebruiksaanwijzing is voor de rollator met standaard duwbuizen en eenzijdige rem links OF rechts. Wij leveren ook rollators met verlengde duwbuizen en maatwerk.
2. De rollator is ook verkrijgbaar in andere zitbreedtes en gebruikersgewichtklassen.
3. Voor de rollator zijn diverse hulpstukken verkrijgbaar om het gebruik aan te passen aan uw behoeften. Denk aan buddyhandgrepen, verzwaringen, infuuspalen, zuurstoffleshouders en meer.
4. Indien u een aanpassing denkt nodig te hebben, dan kunt u het beste even contact opnemen met Premis voor een vrijblijvend advies. Ook uniek maatwerk is mogelijk.
5. Onderdelen van de Premis Provo 2^e generatie rollator zijn verkrijgbaar via www.premis.nl

Reiniging van het product:

1. Reinig de rollator regelmatig met een lichtvochtige doek en een zachte zeep. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Test het schoonmaakmiddel vooraf op een onopvallende plek op de rollator en breng het schoonmaakmiddel niet rechtstreeks aan op de rollator.
2. Reinig het dienblad met de hand. Plaats het dienblad NIET in de vaatwasser.

Onderhoud van het product:

1. Wanneer u de rollator niet gebruikt; stal de rollator in een overdekte en droge ruimte, om roestvorming tegen te gaan.
2. Reinig regelmatig de rollator om ophoping van vuil in de bewegende delen tegen te gaan en te verwijderen. Laat uw rollator tenminste 1x per jaar preventief onderhouden om versleten onderdelen te vervangen voordat zij defect gaan. Zo voldoet u aan de garantievoorwaarden en waarborgt u de veiligheid van het product.

Versie:	2.1	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-08-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing

2e Generatie Provo Rollator met standaard duwbuizen en éézijdige rem rechts OF links

Technische specificaties:

Gebruikte materialen:	Staal, Polyurethaan, verzinkt staal, lak,
Productafmetingen (lxbxh):	Duwbuizen van 79,5 tot 100 cm Frame: 67x54x67 cm Zitting: 39x22x2,5 cm Mandje: 30x40x20 cm
Productgewicht:	10,15 kg
Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg
Periodiek vervangbare onderdelen:	Wielager: RO4WWL PU Banden: RO4WE Moer t.b.v. wielas: RO4WMO Wielas: RO4WWB Remkabel eenzijdig voor duwbeugel RO4EZR Anatomisch Handvat Links RO4HAANL Anatomisch Handvat Rechts RO4HAANR

Het plastic ter bescherming van de rollator en doppen ter bescherming buis voor sturen etc. kunt U bij het plastic afval doen. Beide zijn voor 100% recyclebaar.	
De doos is recyclebaar en kunt U inleveren bij het oud papier. Deze is 100% recyclebaar.	

Garantieregeling:

De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de verzenddatum zoals vermeld op de factuur.

1. Garantie uitsluitingen:
 - a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing
 - b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis Medical.
 - c. Op de rollator zit een  sticker, hierop staan o.a. het Udi nummer () en de productiedatum (-/-). **VERWIJDER DEZE STICKER NIET**, dit i.v.m. de verplichte traceerbaarheid van medische hulpmiddelen in de MDR (Europese wetgeving over medische hulpmiddelen). **Bij verwijdering van deze sticker vervalt elke garantie.**
2. Garantie bepalingen:
 - a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan een retourzending van het product naar Premis Medical.
 - b. De garantietermijn van het frame bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf.
 - c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf.

Uitleg symbolen:

Symbol	Definition	Symbol	Definition
			Fabrikant
	Productiedatum		Goedgekeurd door de Europese unie
	Serienummer		Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger
	Gebruiksaanwijzing is online te vinden		Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

Versie:	2.1	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-08-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwbuizen
en éézijdige rem rechts OF links

Foutopsporing:

De wielen rollen niet meer	De lagers zijn (en wielas) versleten	Lagers (en wielas) vervangen
De handvaten verdraaien of komen los	De handvaten zijn uitgerekt of versleten	De handvaten vastlijmen met contactlijm of vervangen
Één van de wielen zweeft	1. De rollator is niet goed uitgekapt OF 2. Het frame is scheef	1. De rollator volledig uitklappen OF 2. Het frame laten repareren
Het in- en uitklappen van de nieuwe rollator gaat stroef	De rollator is nieuw	De rollator meermaals achterelkaar uit- en inklappen tot het versoepelt.
Ik krijg last van mijn handen/armen/schouders bij het lopen	1. De duwbuizen staan verkeerd afgesteld OF 2. U heeft last van trillingen door oneffen ondergronden	1. De duwbuizen juist afstellen. OF 2. De PU banden vervangen
De remmen remmen niet voldoende	1. Het remschoentje is versleten OF 2. De remmen zijn verkeerd afgesteld	1. Het remschoentje vervangen OF 2. De remmen juist afstellen
Ik krijg de parkeerrem moeilijk omlaag/omhoog gedrukt.	De remhendel is te strak afgesteld	Draai de schroeven in het remhuis voorzichtig een stukje losser tot de remhendel goed te bedienen is. Let daarbij op dat de remhendel niet te veel speling krijgt.
De remkabels blijven haken aan deuren etc.	De steunen staan niet goed afgesteld	De steunen in een hoek van 15 graden naar binnen draaien.

Richtlijnen en regelgeving

1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit gewaarborgd blijft.
2. Het product voldoet aan de NEN1950:1998 normering.
3. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen.
4. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze producten.

 Fabrikant
Premis Medical BV. de Nort 20, 3931 NG, Woudenberg The Netherlands
 



Versie:	2.1	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-08-2026	Auteur:	R. Keuning

Gebruiksaanwijzing



2e Generatie Provo Rollator met standaard duwbuizen
en éézijdige rem rechts OF links

Pagina	6 van 6
Doc.nr.	G.1.1.2.1.627 RO4143AELXXRX
Procedure- verantwoordelijke	Directie
Revisiedatum	06-08-2026

Voldoet aan de relevante eisen van medische hulpmiddelen volgens de:

MDR:2017-745

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

NEN: EN:ISO 11199-2:2021

CEN: NL:1985:1998

NEN: EN:ISO 21856:2022

De bijbehorende technische documentatie is ter inzage beschikbaar.

Uitleg:

MDR: 2017-745

Verordening medische hulpmiddelen - Aanvraag voor medische hulpmiddelen

NEN: EN:IEC 62366-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van bruikbaarheidstechniek op medische hulpmiddelen

NEN: EN:ISO 15223-1:2016

Medische hulpmiddelen - Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten van medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie

NEN: EN:ISO 14971-1:2015

Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen

NEN:EN:ISO 11199-2:2021

Met beide armen gemanipuleerde loophulpmiddelen - Eisen en testmethoden -

CEN: NL:1985:1998

Loophulpmiddelen - Algemene eisen en testmethoden

NEN: EN:ISO 21856:2022

Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

Versie:	2.1	Klassificatie	Publiek
Status:	In gebruik		
Datum:	06-08-2026	Auteur:	R. Keuning