



BISON rollator **313300**

Montage- en gebruikershandleiding

Wandelaar



Zijwaarts en in
hoogte



Wit
gepoedercoat



Veiligheids
gordel
Ondersteu



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

1 - 6

1. Introductie

Je hebt gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig product van Mobilex en daar zijn we erg blij mee. Deze gebruiksaanwijzing bevat een gedetailleerde beschrijving van het product en belangrijke informatie voor het juiste gebruik ervan. Lees daarom deze instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt.

Volg alle instructies, vooral de veiligheidsinstructies, en volg deze te allen tijde op om een veilig en duurzaam gebruik van het product te garanderen.

Als u vragen heeft over het product, neem dan rechtstreeks contact op met uw dealer of met Mobilex A/S

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Dänemark	Telefoon Fax E-mail	+45 87 93 22 20 +45 87 93 17 77 info@mobilex.dk
---	---------------------------	---

Doel

De Bison looptrainer is een medisch hulpmiddel en is ontwikkeld als loophulpmiddel voor mensen die mobiliteitsproblemen hebben die verband houden met staan of lopen. Met dit apparaat kunnen deze mensen gemakkelijker staan en lopen. Het belangrijkste doel van dit product is om milde evenwichtsstoornissen te compenseren en de onderste ledematen te ontlasten. Dit wordt bereikt door de gehele onderarm te ondersteunen op de onderarmleuningen die op de juiste hoogte zijn vergrendeld. De verstelling van de onderarmsteunen wordt ondersteund door een gasdrukveer en kan eenvoudig op en neer worden versteld. De handgrepen met de remhendels kunnen onafhankelijk in diepte en hoek worden aangepast om de beste positie voor de gebruiker te garanderen. De looptrainer biedt daardoor een betere ondersteuning, balans en stabiliteit dan conventionele rollators. Het apparaat mag alleen binnenshuis en op een vlakke ondergrond worden gebruikt. Elk ander gebruik is verboden.

Aanwijzing

De Bison looptrainer is geschikt voor mensen die vanwege allerlei mogelijke gezondheidsproblemen extra stabiele ondersteuning nodig hebben bij het lopen. Het apparaat is ook geschikt voor mensen voor fysieke revalidatie na een chirurgische ingreep aan het been, de voet of de heup.

Risico's van gebruik en contra-indicaties

Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen die ernstige evenwichtsstoornissen hebben of van wie de spierkracht te laag is om te kunnen staan en lopen, zelfs niet met de extra ondersteuning van een looptrainer. De mogelijkheid of noodzaak van het gebruik van een looptrainer moet altijd worden aanbevolen door een arts of fysiotherapeut.

Hoe gebruik je de looptrainer?

Plaats de looptrainer voor u en stap in het apparaat zodat u de handgrepen comfortabel met beide handen kunt vasthouden en op elk moment kunt remmen. De hoogte van de onderarmleuningen moet zo worden ingesteld dat de onderarmen volledig op elkaar rusten zonder dat ze naar voren hoeven te leunen (in dat geval is de verstelling te laag) of de schouders omhoog hoeven te trekken (in welk geval de verstelling te hoog is). De bovenarmen moeten haaks op de onderarmleuningen en zo dicht mogelijk bij het bovenlichaam worden geplaatst om de kracht die u moet uitoefenen tot een minimum te beperken. Zorg er tijdens het lopen voor dat je deze positie aanhoudt in de looptrainer. Bij het lopen moeten ze altijd beginnen met het zwakkere been. Als de kracht niet voldoende is om de staande positie veilig te behouden, moet altijd de optioneel verkrijgbare zitbroek worden gebruikt als beveiliging tegen vallen. Deze moet zo worden aangepast dat deze losjes in het kruis past. De zitbroeken zijn alleen bedoeld om te beschermen tegen vallen en niet als zitplaats. Het wordt aangebracht zodra ze de juiste positie hebben ingenomen in de looptrainer en voordat ze beginnen met looptraining. Gebruik de looptrainer altijd met een begeleider om vallen te voorkomen.

2. Veiligheid

Zorg ervoor dat deze gebruiksaanwijzing wordt gelezen door iedereen die het apparaat gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.

- Het apparaat is goedgekeurd voor gebruikers met een maximaal gewicht van 150 kg.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis op vlakke oppervlakken.
- Het apparaat mag NIET worden gebruikt als stahulpmiddel.
- De gasveer wordt ALLEEN gebruikt om de hoogteverstelling van de armleuningen te ondersteunen.
- De gasveer mag niet worden gebruikt als extra kracht om op te staan.
- Het apparaat mag ALLEEN worden gebruikt als de onderarmleuningen in de juiste positie staan en vergrendeld zijn.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik het apparaat alleen in technisch perfecte staat.
- Breng geen ontwerpwijzigingen aan het apparaat aan, tenzij u schriftelijke toestemming van de fabrikant hebt voor dergelijke wijzigingen.
- Het gebruik van de apparatuur door personen met beperkte mobiliteit mag alleen worden uitgevoerd onder toezicht van een toezichthouder

- Met de verschillende instellingen die op het apparaat mogelijk zijn, moet de gebruiker oppassen dat zijn vingers of andere lichaamsdelen niet bekneld raken tussen twee beweegbare elementen van de looptrainer.
- Controleer voor gebruik **ALTIJD** of alle schroeven goed vastzitten, vooral die van de hoogteverstelling.
- Alle 4 de wielen **MOETEN** tijdens gebruik **ALTIJD** op de grond staan om een stabiel evenwicht te garanderen en ongelukken te voorkomen
- Bij het in- of uitstappen van het apparaat, of bij gebruik van het apparaat in een stilstaande positie, moeten de handremmen **ALTIJD** vergrendeld zijn. Duw hiervoor de remmeter iets naar voren. De vergrendeling wordt ontgrendeld door lichtjes aan de remhendel te trekken. (Zie ook VDe 4 wielen zijn uitgerust met 2 totaalremmen en 2 richtingsremmen, evenals eenvoudig te bedienen handremmen.

3. Beschrijving

Productomschrijving

De Bison is een vierwielige looptrainer met een stijf frame van gepoedercoat aluminium. Het is uitgerust met onderarmleuningen en duwhandvatten met remhandgrepen, die de veiligheid en het comfort van de gebruiker dienen. Het apparaat biedt grote wendbaarheid, stabiliteit en verticaal en horizontaal verstelbare onderarmsteunen. Alle 4 de wielen zijn voorzien van parkeerremmen. De remmen op de handvatten werken op de twee achterwielen.

Levering

De Bison wandeltrainer wordt gedemonteerd geleverd in een kartonnen doos met de volgende inhoud:

- ✓ Basisframe met 4 wielen en remhendels
- ✓ Draai 1 verticaal steunframe in de vloer vast met 2 montageschroeven
- ✓ 1 set onderarmriemen met 2 duwhandvatten
- ✓ 1 In hoogte verstelbare gasveer met ontgrendelingshendel
- ✓ 1 set montagegereedschap (10 mm inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 13 mm standaard sleutel)
- ✓ Deze gebruiksaanwijzing


Eerste controle

Controleer de inhoud van de doos met de bovenstaande lijst. Als u in dit stadium ontdekt dat een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, ga dan niet verder met het montageproces. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier.

Vergadering

Raadpleeg de montage-instructies op de laatste pagina van deze handleiding.

Art no.: PLAT1000GB

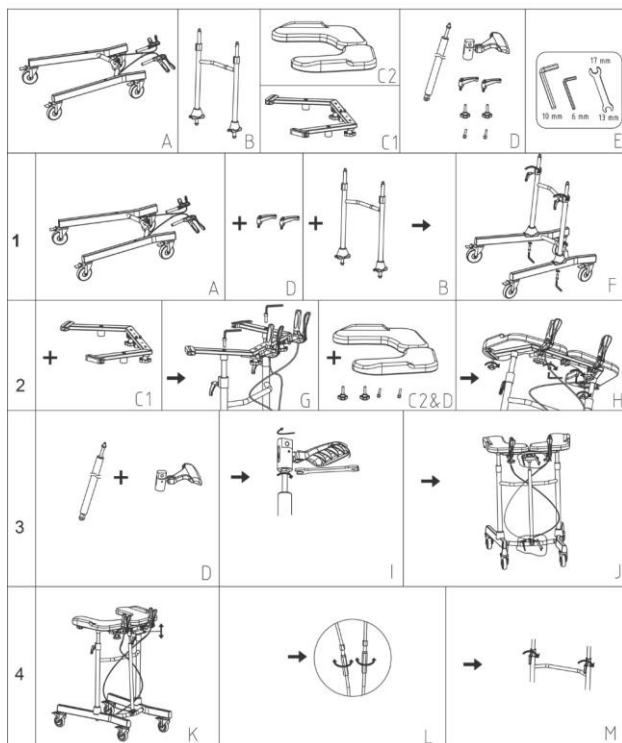

PDF



Productdetails



 **Zorg er na montage en voor gebruik voor dat alle vergrendelingsknoppen en hendels stevig zijn vergrendeld, zodat het apparaat stabiel en stevig staat en er niets onbedoeld beweegt. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan letsel tot gevolg hebben.**

Hoogteverstelling van de onderarmsteunen

- Draai de twee hendelbouten los die zich op de framebuis bevinden
- Ontgrendel de vergrendelingshendel van de gasveer door deze omhoog te trekken,
- Pas de gewenste hoogte aan door de onderarmsteunen naar beneden te duwen of vrij te laten bewegen.
- Laat de vergrendelingshendel van de gasveer los.
- Draai de twee hendelschroeven weer vast.

 **Correct afgestelde onderarmsteunen moeten zich ter hoogte van de ellebogen van de gebruiker bevinden wanneer u rechtop staat met de armen naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de hele onderarm altijd wordt ondersteund.**

Het apparaat mag alleen worden gebruikt met aangedraaide hendelschroeven!

Breedteverstelling van de onderarmsteunen

- Draai beide bevestigingsschroeven onder de onderarmsteunen los
- Stel de onderarmsteunen in op de gewenste breedte door ze naar buiten of naar binnen te schuiven
- Schroef beide bevestigingsschroeven er weer op.

De lengte en hoek van de duwhandvatten aanpassen

- Draai beide hendelschroeven onder de duwhandvatten los.
- Stel de duwhandvatten in op de gewenste lengte en hoek, zodat u de handvatten gemakkelijk en comfortabel kunt vasthouden.
- Draai de schroeven van de hendel weer vast.

De handrem gebruiken

- Om de looptrainer te STOPPEN, trekt u de remhendels naar achteren in de richting van de handgrepen.
- Om STIL TE BLIJVEN STAAN, houdt u de remhendels naar achteren vastgedraaid.
- Om weer WEG TE RIJDEN, laat u de remhendels en de parkeerrem los door de hendel naar voren te duwen; De remmen worden automatisch gelost wanneer u vooruit rijdt.

Vergrendelen / ontgrendelen van de handremmen (effect op de achterwielen)

- Om de remmen te vergrendelen (parkeren), duwt u de remhendels naar voren totdat u een "klikgeluid" hoort.
- Om de remmen te ontgrendelen, trekt u de remhendels weer iets naar achteren totdat u merkt dat ze worden losgelaten.

Vergrendelen / ontgrendelen van de parkeerremmen op de voorwielen

- Om de remmen te vergrendelen, gebruikt u uw voet om het rempedaal op het wielstel in te drukken totdat het vastklikt. Herhaal dit op beide voorwielen.
- Om de remmen te ontgrendelen, trekt u het rempedaal van onderaf met de punt van uw voet omhoog totdat het ontgrendelt. Herhaal dit op beide voorwielen.



Als u het apparaat in een stilstaande positie gebruikt, moeten de pedaalremmen altijd vergrendeld zijn. U moet altijd de remmen vergrendelen als u niet van plan bent het apparaat te verplaatsen. Laat het apparaat nooit ongeremd achter!

Accessoires

Voor de Bison looptrainer zijn diverse accessoires verkrijgbaar met het volgende artikelnummer 313380. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Behandeling tijdens transport

Het wordt aanbevolen om het product opgevouwen te vervoeren. Het ontwerp maakt het gemakkelijk om te openen en op te vouwen. Zorg er tijdens het transport voor dat de rollator in een stabiele positie staat, zodat deze niet kan wegglijden.

4. Specificaties:

Bison gang trainer	Art.Nr. 313300
Breedte van het frame op de achterwielen	66.0 cm
Breedte van de armleuningen min. - max.	66.0 - 80.0 cm
Afstand tussen de handvatten	34.0 cm
Hoogte min. - max.	102.2 - 143.0 cm
Lengte	86.0 cm
Gewicht	18,3 kg
Drijfvermogen	150 kg

Product Stickers

Het typeplaatje bevindt zich op de onderste framebuis



Afbeelding van het typeplaatje Bison 313300

	QR-code Link für Homepage		Produktions- Datum
	Produzent		Max Belastung
	Gebrauchs - anleitung sehen		Max Breite
	Für Innen/Außen Bereich		Serien-nr.
	CE Produkt		Artikelnr.
	Max Belastung Korb		Medizinisches Produkt
	Nur für den Innenbereich		

Overzicht Ikon Betekenis

5. Onderhoud en verzorging

Vuil kan meestal worden weggeveegd met een doek met een mild sopje. Sterk alkalische reinigingsmiddelen of producten die alcohol bevatten, mogen niet worden gebruikt en harde borstels en scherpe voorwerpen mogen niet worden gebruikt voor het schoonmaken.

Het product is meestal onderhoudsvrij, maar moet regelmatig worden gecontroleerd, die door een professional kunnen worden uitgevoerd. Tijdens zo'n controle raden we aan om het volgende te controleren en uit te voeren:

- ✓ Reiniging en desinfectie van het product
- ✓ Controleer het frame/product op vervorming en tekenen van breuk
- ✓ Slijtageonderdelen worden gecontroleerd en indien nodig vervangen
- ✓ Algemeen naspannen van kabels en verbindingen

Aanbevolen levensduur: Meestal 10 jaar, afhankelijk van het gebruik.

Reinigen van de wielen

Het wordt aanbevolen om de wielen schoon te maken met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Smeer de lagers ook door af en toe een smeermiddel op te spuiten of wanneer de wielen beginnen te piepen.

Waarschuwing



Als het product wordt blootgesteld aan zeer kalkhoudend water, kan dit ervoor zorgen dat kalkaanslag zich bindt en zich ophoopt op wiellagers en andere bewegende delen. In dit geval kan het product worden gereinigd met een kalkverwijderaar en vervolgens worden gesmeerd met smeerolie.

Waarschuwing



Bij gebruik in een omgeving met een hoog chloorgehalte kan bijzonder ernstige corrosie optreden en vervalt de garantie.

Waarschuwing



Houd er rekening mee dat als het frame verbogen of gebroken is, het product niet opnieuw mag worden gebruikt, maar moet worden vervangen.

Opslag

We raden aan om het op een droge plaats te bewaren.

Hergebruik

Het product is geschikt voor hergebruik. Vóór hergebruik, waarbij een nieuwe gebruiker het product overneemt, moet het product worden getest in overeenstemming met punt 5.

6. Algemene probleemoplossing

Symptomen	Mogelijke oorzaak	Wat te doen
De wielen draaien niet gemakkelijk	Vuil tussen wielen en vorken	Reinig de ruimte tussen wielen en vorken.
Remmen werken niet goed of de ene rem werkt harder dan de andere.	Remblok versleten	Vervanging van het remblok of wiel vereist. Neem contact op met de klantenservice.
Gasveer kan niet worden losgelaten	Gasveer niet goed afgesteld	Draai de hendel voor de hoogteverstelling met de klok mee totdat deze de ontgrendelingspen op de gasveer raakt.

Vervoer

Het apparaat is geen opvouwbaar product dat geschikt is voor transport. Als het moet worden vervoerd, raden we aan om een voertuig te gebruiken dat groot genoeg is zodat het apparaat niet hoeft te worden gedemonteerd. Als het nodig is om het apparaat te demonteren, volg dan de montage-instructies op de laatste pagina, maar in omgekeerde volgorde. Het apparaat moet op een stabiele manier worden vervoerd en vastgezet, zodat er geen risico bestaat op plotselinge en gevaarlijke bewegingen van het vervoerde product.

7. Verwijdering van het product

Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moet naar het plaatselijke afvalverwerkingspunt worden gebracht.

8. Garantie

Mobilex A/S biedt 2 jaar garantie op schade veroorzaakt door fabricage- of materiaalfouten. De garantie vervalt als het product niet wordt gerepareerd, onderhouden of gebruikt zoals bedoeld. Onderdelen met normale slijtage vallen niet onder de garantie. In het geval van productwijzigingen zonder onze schriftelijke toestemming, vervallen de CE-markering en onze productaansprakelijkheid. In geval van productschade die onder deze garantie valt, neem dan rechtstreeks contact op met uw dealer of Mobilex A/S. De garantie dekt geen transportkosten en geen vergoeding tijdens reparatie en geen persoonlijk letsel. De garantie dekt geen letsel of andere schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.